

取扱説明書 ルブレン 電動舌ブラシ

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、正しくお使い下さい。また、品質保証書を兼ねていますので、紛失しないようにして下さい。

安全上のご注意

ご使用になる前に
必ずお読み下さい。

ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使い頂き、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

危険、警告、注意について

- △ 危険** 誤った取扱いをしたとき、死亡や重傷を負う可能性が高いもの。
△ 警告 誤った取扱いをしたとき、死亡や重傷を負う可能性があるもの。
△ 注意 誤った取扱いをしたとき、軽傷または物的損害に結びつくもの。

図記号の例

-  ● 記号は強制(必ず守ること)を示します。(左図は"必ず守る")
 ◎ 記号は禁止(してはいけないこと)を示します。(左図は"禁止")

△ 危険

-  下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないで下さい。
※ペースメーカー等の体内植込み型医療機器※人工心肺等の生命維持用医用電気機器※心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器
・医用電気機器や家庭用電気治療器の誤作動をまぬくおそれがあります。
- 本機は充電式電池を内蔵しています。直射日光にさらしたり、火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないで下さい。発熱・発火・破裂の原因になります。
- ブラシ部分を喉や舌の奥まで入れないで下さい。窒息やけがの原因になります。

△ 警告

-  次の方は使用しないこと。または使用を歯科医に相談して下さい。
口内の感覚が敏感な方、口腔または歯周の手術の直後や治療中の方、口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯等)のある方、歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方
・傷口を悪化させたり、けがの原因になります。
- 次の方は使用を医師や歯科医に相談して下さい。
妊娠中の方または次の状態と診断された方(心臓病・顔面神経痛・口腔アレルギー症候群、歯周病、歯科用金属アレルギー、体が弱っている、アルコールや薬を飲んでいる。または現在、医師による治療を受けている)
・病気を悪化させたり、健康上のトラブルの原因になります。
- 万が一、煙が出る、変なにおいや音がする等の異常を感じたら、すぐに電源を切り使用を中止して下さい。充電中の場合は充電コードを取り外して下さい。
火災、感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して弊社に修理をご依頼下さい。
- 乳幼児の手の届かないところに置いて下さい。お子様だけでの使用はさせないで下さい。また、周りに注意して使用して下さい。部品などは、乳幼児が飲み込む原因になります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して下さい。お子様がご使用の際には、保護者の監督のもとで行って下さい。周りの環境にも注意して使用して下さい。

-  12歳未満の子供にはお勧めしません。
トラブルやけがの原因になります。
- 複数の人で共用しないで下さい。
病原菌が感染する原因になります。
- 防水キャップを開いたままにしたり、充電ケーブルを傷付ける行為(無理に曲げる、引張る、ねじる、加工する等)をしないで下さい。
火災、ショート、感電の原因になります。
-  製品を分解、改造、修理しないで下さい。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

△ 注意

-  舌に傷、荒れ、違和感がある場合には使用しないで下さい。
けがの原因、悪化の原因になります。
- ブラシや本体に破損や変形がないか使用前にご確認下さい。
けがの原因になります。
- 舌に異常を感じた際には使用を中止し医師に相談して下さい。
けがの原因になります。
- ブラシが傷ついたり破損した場合には、使用しないで下さい。
また、歯で噛む、歯に当てる等の行為で傷つけないで下さい。
けがの原因になります。
- 舌以外や人以外等に使用しないで下さい。
けが、事故、トラブルの原因になります。
-  自分で意思表示ができない人に使用しないで下さい。
けが、事故、トラブルの原因になります。
- 水に入れたり、充電口や充電ケーブルを濡らさないで下さい。
けが、事故、トラブルの原因になります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、研磨剤、強力な洗浄剤(漂白剤など)や研磨パッドでお手入れしないで下さい。
変形、変色、破損、けがの原因になります。

お願い

- 吐みがき以外の目的には、使用しないで下さい。
- 歯みがき粉は、研磨剤等により歯を研磨する力が大きく、電動舌ブラシで使用すると歯を痛める原因になる可能性があります。万が一ご使用の場合には、歯科医にご相談下さい。


防水保護等級について

本機の仕様は水の侵入に対する保護等級「IP6」(あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)ですが、以下の点にご注意下さい。

- 水がかかる場所や湿気の多い場所で使用するときは、必ず充電口がしっかりと閉まっていることを確認して下さい。●石鹼の泡やオイルのついた手で触らないで下さい(浸水する可能性があります)。●ドライヤーなどで乾かさないで下さい(変形する可能性があります)。●水の侵入による故障は、保証期間内でも保証対象外となります。

各部の名称と付属品

ブラシ部分 USB充電アダプタは付属していません。ブラシ部分のみの交換は出来ませんので、約1年ごとに本機をお買い求め下さい。(使用頻度、使用方法により異なります。)

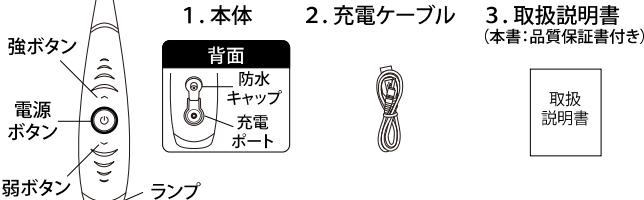

充電の仕方

充電する前に充電ポートや充電器等に水や洗剤等が残っていないことを確認し、水に浸かることのない場所にて付属の充電ケーブルで本機とパソコンまたはUSB充電アダプタを接続して下さい。底のランプが赤く点灯すると充電開始となり、緑になると充電完了です。4時間以上は充電しないで下さい。

